

尺寸:130*55

Ear Cleaner with Camera



Need an E-user guide in other languages (EN/DE/FR/IT/ES/JP)
Scan the QR code to get it.

User Manual
EN/DE/FR/IT/ES/JP

Precautions

- Do not use this tool if you have an active ear infection, ruptured eardrum or redness. Discontinue use immediately and seek medical care whenever you feel pain or discomfort during use.
- Please read the instruction carefully. We do not assume responsibility for any injuries that might be caused by our products. If you have ear drainage, discharge, ear pain, ear perforation or injury, please consult with doctors before using.
- The downloaded app helps you visualize and remove ear wax from ear canal. Please keep the ear spoon at a safe distance from the eardrum.
- Please be careful when using it to avoid getting too deep into the ear canal and causing injury to ear canal.
- If the ear wax is hard and stubborn to remove, please use ear drops for a few days to soften it before removing. Do not press too hard on your ear canal when removing the wax to avoid any scraping.
- If there is a significant buildup of earwax when first using the device, it's best to remove the wax in stages to avoid irritation.
- After the initial wax cleaning, use the device as required to avoid any further build-up of wax.

EN-1

- Always disinfect the accessories and device with alcohol after use. When cleaning the lens, please wipe carefully with professional alcohol wipe cotton swab. It is forbidden to soak in water or wash the whole body.
- It is forbidden to use this device while charging.
- It is prohibited for children to use this product alone to avoid careless harm.

Steps to use on the phone

Step 1

Download "Soulear" App
For iOS:
Download and install the App "Soulear" from App Store.
For Android:
Download and install the App "Soulear" from Google Play Store.
Optional:
Scan the QR Code below to download the App.




EN-2

Compatible Device:
Android 4.4, iOS 9.0 and higher version.
Android system phone like Samsung S7, Galaxy S6 edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, XL, Pixel 3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus etc.
iOS system phone like iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, etc.

Notice:
This model can't work for computer systems!

Step 2


Long press the switch key to open the device, after 5 seconds, then step into the next operation.

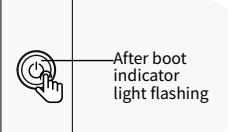

Step 3


Open the "Soulear" App, click the "Connect Device", follow the pop-up prompt and click to connect now to jump to the mobile WIFI setting interface.

EN-3

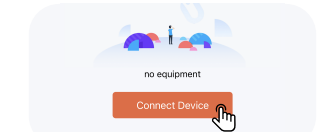


Step 4

Find "Soulear-xxxx" on the WIFI setting interface and click to connect.

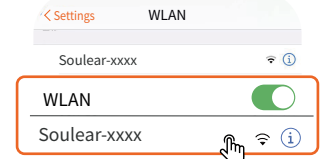

Step 5


After the mobile phone displays "Soulear-xxxx" WIFI is connected, return to the App again and click the "Connected" to enter the device.

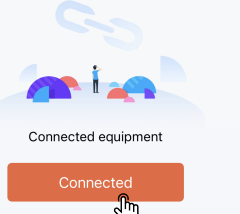


EN-4

After connecting to the WIFI of the product, you will be asked some questions:

iOS:
"Soulear" would like to find and connect to devices on your local network.
Suggestion: Click "OK"

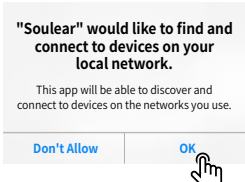


Allow "Soulear" to use wireless data?
Suggestion:
Click "WLAN&Cellular/WLAN Only"

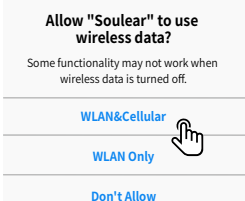


EN-5

Android:
If your mobile phone displays the following prompts, WIFI has no data connection, whether to continue trying to use the WIFI? Whether to keep the connection? Whether to switch WIFI?
Suggestion:
Click "Keep"/"CONNECT"/"Decline" option

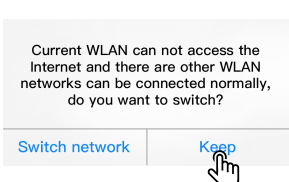

This WLAN network has no Internet access. Connect anyway?
CANCEL CONNECT

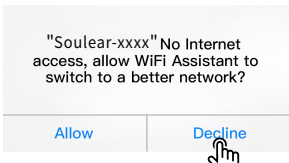


EN-6

Ear Pick Accessories



Helpful Tips

- Before use, please check and confirm that the replaceable ear spoon silicone cover is assembled to the designated position and not easy to fall (as shown in the picture).

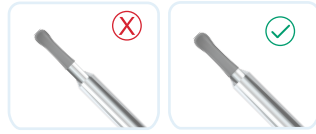

- If you are the first time using this product, you should carefully and slowly adapt to the touch of the ear spoon in the ear canal and then track it from the APP to get the ear canal environment to avoid accidental injury to your ear canal.

- Before use, you can choose wet wipes or alcohol cotton to wipe the front camera of ear spoon. If necessary, you can freely replace the accessories you want to use.

EN-7

Troubleshooting

Problems	Suggestions
Cannot store photos or videos to your phone	Let Soulear permit the authority of photos, media and files in your device
Camera is no response, camera doesn't light up	Please charge the device
App crashed	Please uninstall App and scan the QR code to install
Live image does not show after launching the app	1. Make sure you connect the correct WIFI ID "Soulear-xxxx". 2. The question: This WLAN network has no Internet access. Connect anyway? Please be sure to choose the "Connect". If you choose "CANCEL" at the first time, you need to forget network of the "Soulear-xxxx" WIFI on your phone, then connect with this WIFI again. Continue to open the app and choose "CONNECT" of this question, so that it can work properly. 3. Enter your mobile device setting and allow the "Soulear" App to access "WLAN" or "WLAN & Cellular Data". 4. Close the App and open it again. 5. Turn the mobile phone data on, then off again.

EN-8

Ear endoscope's red light on	Please charge the product
WIFI connection break	Please restart ear endoscope, open the App, connect to WIFI
When iPhone prompts "I can't join this WiFi, the network is temporarily unavailable, please try again later"	When the above situation occurs, please try to turn off the product, turn it on again after 30s, and reconnect to WIFI to connect and use.
When Android phone connects to WIFI, it prompts "Network access is full"	When the above situation occurs, please try to turn off the product, turn it on again after 30s, and reconnect to WIFI to connect and use.
The power indicator of the ear pick shows red	Please use the matching charging cable to charge
If the above operating instructions fails to solve the problems, please contact the seller's customer service by email, and we will provide you with further solutions	

EN-9

Product Parameter

Product Name Ear Cleaner with Camera	Working Frequency 2.4GHz
Network Standard IEEE 802.11b/g/n	Image Sensor CMOS
Image Transmission Rate 30fps	Battery Capacity 240mAh
Environment Temperature 10-50 °C	Charging Time 1.5h
Battery Life About 70minutes	Working Voltage 3.7V-4.2V
Input Parameter 5V=0.4A	Lens Diameter 3.5mm
Rate Power 0.75W	Resolution 1080P
Best Focal Length 1.5-2cm	Charging port USB2.0
Gravity Sensor 6 Axis	

EN-10

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie eine aktive Ohrinfektion, ein gerissenes Trommelfell oder Rötungen haben. Brechen Sie die Verwendung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie während der Verwendung Schmerzen oder Unbehagen verspüren.
- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Wir übernehmen keine Verantwortung für Verletzungen, die durch unsere Produkte verursacht werden könnten. Wenn Sie Ohrenausfluss, Absonderungen, Ohrenschmerzen, Perforationen oder Verletzungen haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Die heruntergeladene App hilft Ihnen bei der Visualisierung und Entfernung von Ohrschmalz aus dem Gehörgang. Bitte halten Sie den Ohröffel in einem sicheren Abstand zum Trommelfell.
- Seien Sie bei der Verwendung vorsichtig, damit Sie nicht zu tief in den Gehörgang eindringen und diesen verletzen.
- Wenn das Ohrschmalz hart ist, verwenden Sie bitte einige Tage lang Ohrentropfen, um es aufzuweichen, bevor Sie es entfernen. Drücken Sie beim Entfernen des Ohrschmalzes nicht zu fest auf Ihren Gehörgang, um Kratzer zu vermeiden.

DE-1

- Wenn sich bei der ersten Verwendung des Geräts viel Ohrschmalz angesammelt hat, entfernen Sie das Ohrschmalz am besten schrittweise, um Irritationen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nach der ersten Reinigung regelmäßig, um weitere Ohrschmalzablagerungen zu vermeiden.
- Desinfizieren Sie das Zubehör und das Gerät nach dem Gebrauch immer mit Alkohol. Wenn Sie die Linse reinigen, wischen Sie sie bitte vorsichtig mit einem professionellen Alkoholtupfer ab. Es ist verboten, das Gerät in Wasser zu tauchen oder den ganzen Körper zu waschen.
- Es ist verboten, das Gerät während des Aufladens zu benutzen.
- Es ist verboten, dass Kinder dieses Produkt alleine benutzen, um fahrlässige Schäden zu vermeiden.

DE-2

Schritte zur Benutzung am Smartphone

Schritt 1

Laden Sie die App "Soulear" herunter
Für iOS:
Laden Sie die App "Soulear" aus dem App Store herunter und installieren Sie sie.
Für Android:
Laden Sie die App "Soulear" aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie sie.
Optional:
Scannen Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen.




Kompatible Geräte:
Android 4.4, iOS 9.0 und höhere Versionen.
Android-System-Handy wie Samsung S7, Galaxy S6 Edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, XL, Pixel 3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus usw.
iOS-System-Telefon wie iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, etc.

Hinweis:
Dieses Modell funktioniert nicht für Computersysteme!

DE-3


Schritt 2

Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Gerät zu starten. Nach 5 Sekunden können Sie den nächsten Schritt ausführen.

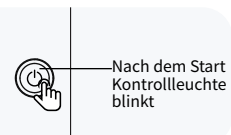

Schritt 3

Öffnen Sie die "Soulear" App, klicken Sie auf das "Verbinden Sie das Gerät", folgen Sie der Aufforderung und klicken Sie auf "Jetzt verbinden", um die WLAN-Einstellungsoberfläche aufzurufen.

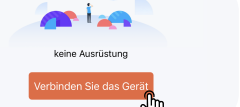

Schritt 4

Suchen Sie "Soulear-xxxx" auf der WLAN-Einstellungsseite und klicken Sie auf verbinden



DE-4


Schritt 5

Nachdem das Mobiltelefon "Soulear-xxxx" WLAN ist verbunden angezeigt, kehren Sie wieder zur App zurück und klicken Sie auf das "Verbunden", um das Gerät zu bedienen.



Nachdem Sie sich mit dem WLAN des Produkts verbunden haben, werden Ihnen einige Fragen gestellt:

iOS:
"Soulear" möchte Geräte in Ihrem lokalen Netzwerk finden und sich mit ihnen verbinden.
Vorschlag: Klicken Sie auf "OK"

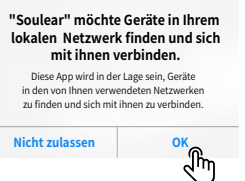


DE-5

Erlauben Sie "Soulear", WLAN-Daten zu verwenden?
Vorschlag:
Klicken Sie auf "WLAN & Mobilfunk/Nur WLAN".





Android:
Wenn Ihr Mobiltelefon die folgende Meldung anzeigt: "WLAN hat keine Datenverbindung", sollen Sie weiter versuchen, das WLAN zu nutzen? Soll die Verbindung aufrechterhalten werden? Soll zu WLAN gewechselt werden?
Vorschlag:
Klicken Sie auf "Behalten"/"VERBINEN"/"Ablehnen"-Option

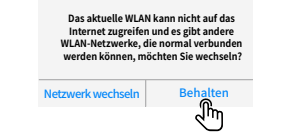

DE-6

Zubehör für Ohrstäbchen

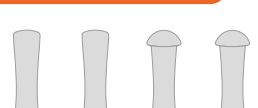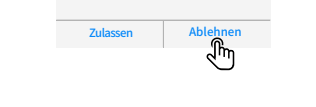

Hilfreiche Tipps

- Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die austauschbare Silikonabdeckung des Ohröffels in der vorgesehenen Position montiert ist und nicht herunterfallen kann (wie auf dem Bild zu sehen).



DE-7

- Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, sollten Sie sich vorsichtig und langsam an die Berührung des Ohröffels im Gehörgang gewöhnen und ihn dann von der APP aus verfolgen, um die Umgebung des Gehörgangs zu erhalten und um versehentliche Verletzungen Ihres Gehörgangs zu vermeiden.

- Vor dem Gebrauch können Sie die vordere Kamera des Ohröffels mit Feuchttüchern oder Alkoholvatze abwischen. Falls erforderlich, können Sie das Zubehör, das Sie verwenden möchten, frei austauschen.

Fehlersuche

Probleme	Vorschläge
Sie können keine Fotos oder Videos auf Ihrem Smartphone speichern.	Lassen Sie " " den Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien auf Ihrem Gerät zu.
Die Kamera reagiert nicht, die Kamera leuchtet nicht auf.	Bitte laden Sie das Gerät auf.
App ist abgestürzt	Bitte deinstallieren Sie die App und scannen Sie den QR-Code zur Installation.

DE-8

Live-Bild wird nach dem Starten der App nicht angezeigt	1. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige WLAN-ID "Soulear-xxxx" verwenden. 2. Bei der Frage: Dieses WLAN-Netz hat keinen Internetzugang. Trotzdem verbinden? Bitte wählen Sie unbedingt die Option "Verbinden". Wenn Sie beim ersten Mal "ABBRECHEN" wählen, müssen Sie das WLAN-Netzwerk "Soulear-xxxx" löschen und sich dann erneut mit diesem WLAN verbinden. Öffnen Sie dann die App und wählen Sie bei dieser Frage "VERBINDEN", damit Sie richtig funktionieren kann. 3. Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Mobilgeräts und erlauben Sie der App "Soulear" den Zugriff auf "WLAN" oder "WLAN & Mobilfunkdaten". 4. Schließen Sie die App und öffnen Sie sie erneut. 5. Schalten Sie die Mobilfunkdaten ein und wieder aus.
Das rote Licht des Ohrendoskops leuchtet	Bitte laden Sie das Produkt auf
WLAN-Verbindung unterbrochen	Bitte starten Sie das Ohrendoskop neu, öffnen Sie die App und stellen Sie eine WLAN-Verbindung her.
Wenn das iPhone die Meldung ausgibt: "Kann keine Verbindung zu diesem WLAN herstellen, das Netzwerk ist vorübergehend nicht verfügbar, bitte versuchen Sie es später erneut."	Wenn die oben genannte Situation auftritt, versuchen Sie bitte, das Produkt auszuschalten und schalten Sie es nach 30 Sekunden wieder ein. Verbinden Sie sich erneut mit dem WLAN, um eine Verbindung herzustellen.

DE-9

Wenn das Android-Handy eine Verbindung zum WLAN herstellt, erscheint die Meldung "Netzwerkzugang ist eingeschränkt".	Wenn die oben genannte Situation auftritt, versuchen Sie bitte, das Produkt auszuschalten, schalten Sie es nach 30 Sekunden wieder ein und verbinden Sie sich erneut mit dem WLAN, um eine Verbindung herzustellen.
Die Stromanzeige des Ohrstöpsels leuchtet rot	Bitte verwenden Sie das passende Ladekabel zum Aufladen

Product Parameter

Produkt Name Ohrreiniger mit Kamera	Arbeitsfrequenz 2.4GHz
Netzwerk-Standard IEEE 802.11b/g/n	Bildsensor CMOS
Bildübertragungsrate 30fps	Abbau-Kapazität 240mAh
Umgebungstemperatur 10-50 °C	Aufladezeit 1.5h

DE-10

Akkulaufzeit Etwa 70 Minuten	Betriebsspannung 3.7V-4.2V
Eingangsparameter 5V=0.4A	Durchmesser der Linse 3.5mm
Leistung 0.75W	Auflösung 1080P
Beste Brennweite 1.5-2cm	Anschluss zum Aufladen USB2.0
Schwerkraft-Sensor 6 Achsen	

DE-11

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.