

Product Specifications


Product Name		Product Model	MLS-RY02
Product Power	5W	Charging Voltage	5V $\overline{=}$
Operating Voltage	3.7V $\overline{=}$		
Lithium Battery Capacity	1200mAh		
Compliance Standards	GB 4706.1-2005/GB 4706.10-2008		



Nantong Manlaishi Electronic Technology Co., Ltd.
Building 3, 2nd Floor, 30 Binshui Road, Development Zone, Nantong City
Website: www.manlaishi.com
Phone: 400-1087-178

EYE MASSAGER
MLS-RY02

User Manual

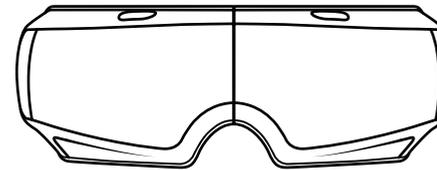

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

4.Maintenance

Daily maintenance


1. In order to avoid affecting the effect of eye moisturizing, add distilled water or purified water, do not add oily, sticky or toxic and harmful liquid in case of product and user harm.
2. Do not wash with water. If there is dirt, wipe it on the surface of the product.
3. Please keep the fog hole clean. Do not use sharp objects to clean the fog hole to prevent damage to the fog hole. Use cotton swabs to clean.
4. Please keep it properly if it is not used for a long time.

Q&A


1. Failed to start up. Please confirm the power or long touch the power button.
2. Can't spray, please add professional eye drops.
3. Can't charge, Check whether the charging cable and charger are properly connected.

12

6. The indicator on the right side is blue when working normally.
7. Warm tip: The product will automatically shut down after running for 15 minutes. If you need to extend it, please turn it on again.
8. Bluetooth: The first time using the Bluetooth, search for Bluetooth device "runyananmoyi" by your phone and connect it; Next time using the Bluetooth, the product will connect your mobile phone automatically if is in the range. Warm tip: If using the Bluetooth, the music that comes with the product will not play.

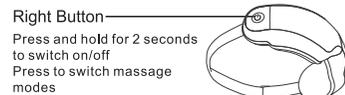


Right Button
Press and hold for 2 seconds to switch on/off
Press to switch massage modes

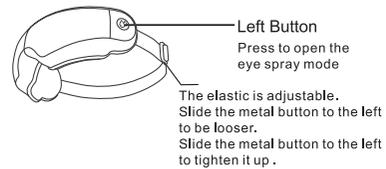


Left Button
Press to open the eye spray mode
The elastic is adjustable. Slide the metal button to the left to be looser. Slide the metal button to the left to tighten it up.

10

包装明细:

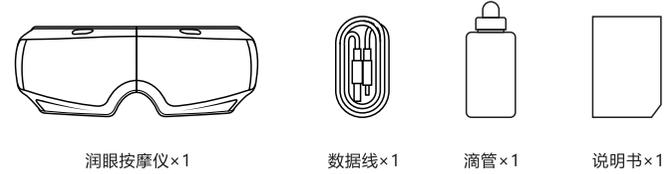

一. 部件说明

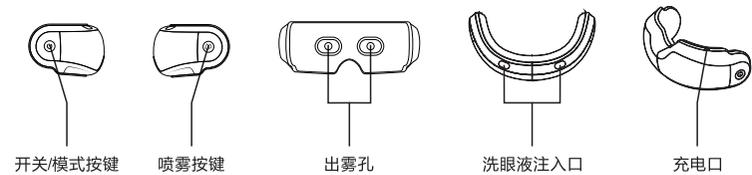


1

8. 蓝牙使用:

初次使用时, 在产品开机状态下打开手机蓝牙界面, 搜索到设备名“润眼按摩仪”并连接即可; 关机后再次使用时, 如初始连接的手机在蓝牙连接范围内即可自动连接。
温馨提示: 蓝牙模式下, 产品自带的音乐将不会播放。



右侧按键
长按 2 秒开关机
短按切换按摩模式

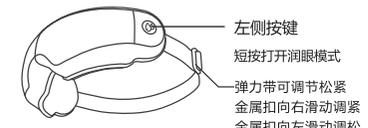

左侧按键
短按打开润眼模式
弹力带可调节松紧
金属扣向右滑动调紧
金属扣向左滑动调松

3

二. 使用说明

初次使用时, 或产品长时间搁置后电池电量损耗, 请充电以确保能正常使用。

- 1.本产品由右侧触摸“⦿”控制, 长触2秒开机, 长触2秒关机。
- 2.轻触左侧“⦿”键可选择润眼功能的开启和关闭, 推荐添加蒸馏水或纯净水, 润眼功能分为清洁护理、润眼保湿两种, 长按“⦿”可开启关闭加热。
- 3.轻触右侧“⦿”键可选择眼部健康模式、按摩模式、轻松模式。(注意按键后的语音播报提示)
- 4.在任何模式下, 长触“⦿”键2秒自动关机。
- 5.当产品缺电时右侧指示红灯亮起, 伴有语音提示机器会自动关机, 此时请立即充电, 充电时红灯亮, 充满时绿灯亮。
- 6.正常工作时, 右侧指示蓝灯亮。
- 7.温馨提示: 产品开机模式下运行15分钟后自动关闭, 如需延长请再次开启。

2

3.Warning

1. This product is a personal care eye massage instrument and cannot be used as a substitute for medical instrument or medicine.
2. Do not use the product while driving or walking.
3. Use with caution in patients with glaucoma, cataract, fundus bleeding, etc.
4. The box is washable; Do not inject harmful liquid into the container to avoid eye damage. Use with caution if you have undergone eye or nose surgery or have plastic materials placed on your face.
5. Please stop immediately if you feel uncomfortable during use.
6. Do not disassemble the product without permission.
7. There are lithium batteries in the product, please do not expose to high temperature environment.
8. For diabetics, please use it under the guidance of a doctor.

11

三. 警告

- 1.本品为个人护理眼部按摩器械, 不能替代医疗器械使用。
- 2.请勿在驾驶、行走等情况下使用。
- 3.有青光眼、白内障、眼底出血等者慎用。
- 4.本品箱体可进行清洗; 请勿将有害液体注入箱体中以免对眼部造成伤害。曾实施过眼部、鼻梁手术或在脸部放置整形材料者慎用。
- 5.在使用过程中如有不适请立即停止使用本产品。
- 6.禁止私自拆卸本产品。
- 7.产品内有锂电池, 请勿置于高温环境中。
- 8.糖尿病患者请在医生指导下使用。

4


2.Use instruction

When using the product for the first time, or the battery power loss after a long time, please charge to ensure normal use.

1. The product is controlled by touching "⦿" on the right side, and it will start up for 2 seconds after long touching, and shut down for 2 seconds after long touching.
 2. Press the left "⦿" button to enable or disable the spray function. Distilled water or purified water is recommended to add in.
 3. Press the "⦿" button on the right to switch eye health mode, massage mode and relax modes. (Pay attention to the voice prompt after pressing the button)
 4. Press "⦿" and hold for 2 seconds to automatically shut down.
 5. When the product is short of power, the red light on the right side will be on, accompanied by voice prompts. The machine will shut down automatically.
- Please use the mobile phone charger and the cable provided with the product to charge the battery. The charging time is about 3 hours, and the indicator light turns green when fully charged.

9

The packing detail :

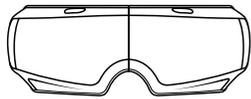

Eye massager × 1



Cable × 1



Bottle × 1



Instructions × 1


1. Parts instruction



Power/Switch
mode button




Spray button

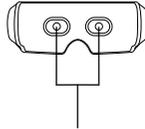

Fog hole

8

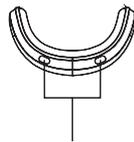

Injection port



Charging port

四. 维护与保养

日常保养

1. 为避免影响润眼效果，推荐添加蒸馏水或纯净水，请勿添加油性、粘性或者有毒有害液体，以免对产品使用者造成伤害。
2. 不可水洗，如有脏污请在产品表面进行擦拭。
3. 产品出雾孔请注意保持清洁，请勿使用尖锐物体去清理出雾孔，防止出雾孔破损，建议使用棉签清洁。
4. 长时间不用请妥善保存。

常见问题

1. 无法启动，请确认电量或确认是否已长触开机键。
2. 无法喷雾，请确认出雾孔是否堵塞或破损。
3. 无法充电，请确认充电线和充电器是否连接完好。

五. 保修服务

自购买日起一年内, 若发生如因制造工艺或元器件造成的损坏, 本公司维修服务中心将为持证用户提供免费维修服务, 视情况更换零件或整个产品。

以下情况不属于包换、维修范围, 但仍然提供满意的服务, 且按规定的价格合理收费。

1. 不能出示或涂改保修卡。
2. 因非正常操作情况下使用所引起的损坏, 例如接入不当电源、使用不当配件、不当安装、不按说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等, 因运输及其他意外而造成的损坏。
3. 自行改装、拆卸、修理而导致机件受损和人为损坏, 其他因不可抗力 (如自然灾害、电压异常等) 造成的损坏。

保修卡

为了保护您的权益, 请您认真填写, 并妥善保管, 作为维修时的凭证。

用户资料

产品型号	
联系电话	
顾客名字	
购买日期	

保修日期	故障及处理办法	完成日期	顾客签名

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.