



SAFETY INFORMATION AND IMPORTANT NOTES

GERMAN

PORTUGUESE

FRENCH

SPANISH

ENGLISH

ITALIAN

Deep Care GmbH
Königsallee 43, 71638 Ludwigsburg, Germany

Basic Operation

Power On

Press **Power button** for around 2 seconds and the device will start up and display the lock screen. Slide up to unlock the device, if needs password or pattern, please input them to unlock device.

Power Off / Restart


Press **Power button** for around 2 second and choose **Power off** in the popup, or choose **Restart** to re-boot the device.

Standby

When the device is working, press **Power button** shortly to shut the screen and it goes into standby mode. Press **Power button** again to awake the device, and slide the lock to continue.

Volume + / -

At most interfaces, the volume buttons are used to adapt sound. At some interfaces, the volume buttons can be used to switch between selections, or zoom in / out, or take a picture.

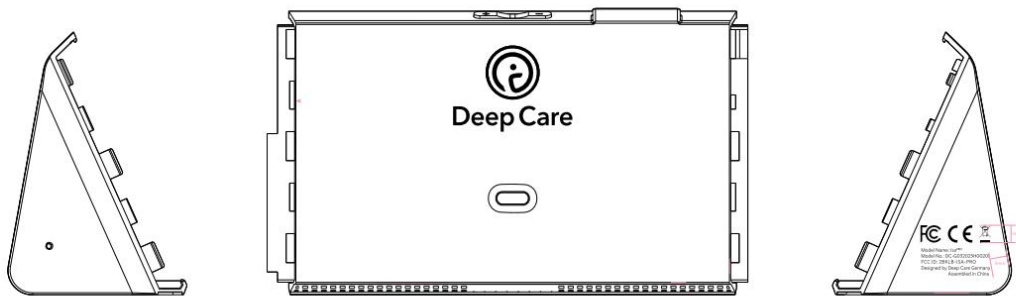


- **Notification Bar:** At the top of screen.

It displays time, battery, Wi-Fi signals, and notification icons or previews, etc.



- **Notification Panel:** Slide down from Notification Bar.

It displays switchers of functions and notifications. Tap the switchers to turn ON/OFF functions. Tap the notifications to open it, or slide it leftwards quickly to clear the notification. You can also slide the notification leftwards or rightwards slowly, and click  to delay the notification, or click  to set notification type.

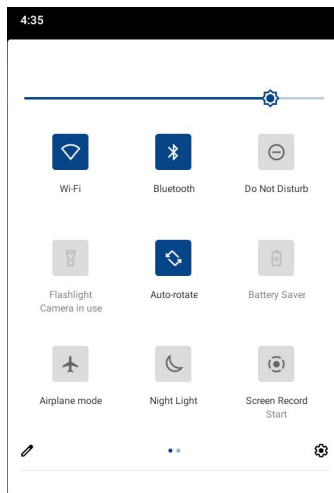

- **Navigation Button:** At the bottom of screen.

	Back Button Tap it to go to the previous page.
	Home Tap it to go to Home Screen.
	Recent Task Tap it to view recent tasks. Tap the task frame to open it, or long press it to remove from list.

- **Google Search Widget:** Tap the Widget to input keywords or tap the icon for voice search (need network).



- **Enter App Menu:** At Home Screen, slide up to enter App menu, in which you can view all Apps list and search Apps.
- **Add Home Screen Apps:** You can add App icon to Home Screen from App menu by long pressing App icon and move to Home Screen before loosen your finger. Click App icon to open it. Long press App icon to see most used functions and choose one to open.
- **Remove Home Screen Apps:** Long press App icon and move to top of screen to remove it.
- **Home Screen Settings:** Long press blank area of Home Screen, you can set WALLPAPERS, WIDGETS and SETTINGS from pop-up options. Tap SETTINGS and make general Home Screen settings.
- **Set Wallpaper:** Long press blank area of Home Screen, choose WALLPAPERS, and choose a way to open wallpapers. After choose a picture, tap Set wallpaper, set wallpaper as Home screen, or Lock screen, or Home screen and lock screen.
- **Add Widgets to Home Screen:** Long press blank area of Home Screen, choose WIDGETS, and press a widget and move to Home Screen before loosen your finger.
- **Home Screen Pages:** Long press a widget or App icon on Home Screen, and move to left or right edge of screen, the widget or App icon will be moved to another page (if no existed page, it will create a new page). At Home Screen, slide leftward or rightward to switch between pages.

GERMAN



Sicherheitsinformationen und wichtige Hinweise

Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen zu Ihrer ISA. Verwenden Sie ISA nicht auf andere Weise als in diesem Handbuch beschrieben, da dies zu einem Brand, elektrischen Schlag oder anderen unerwarteten Unfällen führen könnte. Sicherheitsstandardkennzeichen und -deklarationen gelten nur für die unterstützten Spannungen und Frequenzen in den jeweiligen Ländern oder Regionen.

Articoli in consegna:

- 1x ISA
- 1x Netzteil
- 1x Bedienungsanleitung

© 2021 Deep Care GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Deep Care GmbH, Königsallee 43, 71638, Ludwigsburg, Deutschland.

www.deep-care.de

Stromversorgung:

- Halten Sie den Bereich um den Netzanschluss immer frei, so dass Sie bei Bedarf einfach das Netzkabel abtrennen können.
- Trennen Sie den Stecker niemals durch Ziehen am Kabel ab.

Allgemeine Hinweise:

- Stellen Sie nichts auf die ISA. Seien Sie besonders vorsichtig mit Metallteilen wie Büro- und Heftklammern und mit Behältern, in denen sich brennbare Flüssigkeiten wie Alkohol oder Verdünner befinden.

Laserprodukt Klasse 1:

- Dieses Produkt ist als Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN/IEC 60825-1, Ausgabe 3 (2014) klassifiziert.
- Der Sensor in diesem Produkt entspricht den FDA-Leistungsstandards für Laserprodukte mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3 wie in der Lasermitteilung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.



Verwenden Sie ISA in den folgenden Fällen nicht:

- Metallische Fremdkörper oder Flüssigkeiten sind in Ihre ISA gelangt.
- ISA stößt Rauch aus oder außergewöhnliche Gerüche oder Geräusche treten auf.
- Das Netzkabel oder der Stecker überhitzen, sind gebrochen, verbogen oder anderweitig beschädigt.
- Die Umgebungstemperatur übersteigt 35° C.

Die Nichtbeachtung folgender Punkte kann zu einem Brand, einem elektrischen Schlag oder Verletzungen führen:

- Öffnen oder verändern Sie ISA nicht.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel, welches mit Ihrer ISA mitgeliefert wurde.
- Schließen Sie keine anderen Spannungen oder Frequenzen als die angegebenen an.
- Stecken Sie das Netzkabel vollständig in die Steckdose ein.
- Führen Sie das Anschließen und Abtrennen des Netzkabels nicht mit nassen Händen durch.
- Beschädigen Sie das Netzkabel nicht durch Verdrehen, Bündeln, Binden, Ziehen oder übermäßiges Biegen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel.
- Lassen Sie ISA während eines Gewitters nicht am Stromnetz.

Der Standort zum Betreiben Ihrer ISA sollte folgenden Punkten entsprechen:

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Stellen Sie ISA nicht an einem Standort auf, der unstabil oder Vibrationen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie ISA nicht an Standorten auf, die sehr heiß werden (direkte Sonneneinstrahlung oder in der Nähe einer Heizquelle), feucht oder staubig sind oder sich draußen befinden.
- Stellen Sie die ISA nicht auf einen Teppich.
- Halten Sie den sichtbaren Bereich vor der ISA so frei wie möglich. Das Blockieren des Sensorblickfeldes verringert die Leistung.
- ISA kann überall in einem Schreibtisch stehen. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie ISA im 45° Winkel links oder rechts vor sich aufstellen.
- Die beste Leistung wird erzielt, wenn ISA direkt auf der Schreibtischplatte platziert wird. Bitte vermeiden Sie es, ISA auf anderen Objekten wie z.B. Büchern zu platzieren.

PORTUGUESE



Informação sobre segurança e notas importantes

Este manual contém informações importantes e medidas de segurança sobre o seu ISA.

Não utilizar ISA de outras formas para além das descritas neste manual, pois isso poderia resultar em incêndio, choque eléctrico ou outros acidentes inesperados.

As marcações e declarações de padrões de segurança aplicam-se apenas às voltagens e frequências suportadas nos respectivos países ou regiões.

Escopo da entrega:

- 1x ISA
- 1x unidade de fornecimento de energia
- 1x manual de instruções

© 2021 Deep Care GmbH. Todos os direitos reservados.

Deep Care GmbH, Königsallee 43, 71638, Ludwigsburg, Alemanha.

www.deep-care.de

Alimentação eléctrica:

- Mantenha sempre a área em redor do conector de alimentação desimpedida para que possa facilmente desligar o cabo de alimentação, se necessário.
- Nunca desconecte da tomada puxando o cabo.

Notas gerais:

- Não colocar nada sobre o ISA. Ter especial cuidado com peças metálicas como cliques e agramos de papel e com recipientes que contenham líquidos inflamáveis, como álcool ou diluente.

Produto laser classe 1:

- Este produto está classificado como um produto laser de Classe 1 em conformidade com a EN/IEC 60825-1, Edição 3 (2014).
- O sensor neste produto cumpre as normas de desempenho da FDA para produtos laser, excepto no que diz respeito à conformidade com a IEC 60825-1 Ed. 3, conforme descrito no Aviso Laser n.º 56, datado de 8 de Maio de 2019.



Não utilizar ISA nos seguintes casos:

- Objectos metálicos ou líquidos estranhos entraram no seu ISA.
- O ISA está a emitir fumaça ou estão a ocorrer odores ou ruídos anormais.
- O cabo de alimentação ou a ficha sobreaquece, está partido, dobrado ou danificado de outra forma.
- A temperatura ambiente excede os 35° C.

A não observância dos seguintes aspectos pode resultar em incêndio, choque eléctrico ou ferimentos:

- Não abrir ou modificar o ISA.
- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com o seu ISA.
- Não ligar voltagens ou frequências que não sejam as especificadas.
- Ligar totalmente o cabo de alimentação à tomada de rede.
- Não ligar ou desligar o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não danificar o cabo de alimentação por torção, empacotamento, amarração, tracção ou dobragem excessiva.
- Não colocar quaisquer objectos sobre o cabo.
- Não deixar o ISA ligado à rede durante uma trovoadas.

O local de operação da sua ISA deve estar em conformidade com os seguintes pontos:

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não colocar ISA num local que seja instável ou sujeito a vibrações.
- Não colocar ISA num local que se torne muito quente (luz solar directa ou perto de uma fonte de calor), húmido, poeirento ou ao ar livre.
- Não colocar o ISA sobre um tapete.
- Manter a área visível em frente ao ISA o mais clara possível. O bloqueio do campo de visão do sensor irá reduzir o desempenho.
- O ISA pode ser colocado em qualquer lugar numa mesa. No entanto, recomenda-se que coloque ISA num ângulo de 45° à esquerda ou à direita na sua frente.
- O melhor desempenho é alcançado quando o ISA é colocado directamente sobre a mesa de trabalho. Por favor evite colocar ISA em outros objectos, tais como livros.

FRENCH



Informations sur la sécurité et notes importantes

Ce manuel contient des informations importantes et des mesures de sécurité concernant votre ISA. N'utilisez pas l'ISA d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel, car cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres accidents inattendus. Les marquages et les déclarations relatifs aux normes de sécurité ne s'appliquent qu'aux voltages et aux fréquences supportés dans les pays ou régions respectifs.

Portée de la livraison:

- 1x ISA
- 1x unité d'alimentation
- 1x manuel d'utilisation

© 2021 Deep Care GmbH. Tous droits réservés.

Deep Care GmbH, Königsallee 43, 71638, Ludwigsburg, Allemagne.

www.deep-care.de

Alimentation électrique:

- Gardez toujours la zone autour de la prise d'alimentation libre, de sorte que vous puissiez facilement débrancher le câble d'alimentation si nécessaire.
- Ne débranchez jamais la prise en tirant sur le câble.

Remarques générales:

- Ne posez rien sur l'ISA. Soyez particulièrement prudent avec les pièces métalliques telles que les trombones et les agrafes, ainsi qu'avec les récipients contenant des liquides inflammables tels que de l'alcool ou des diluants.

Produit laser de classe 1:

- Ce produit est classé comme produit laser de classe 1 conformément à la norme EN/IEC 60825-1, édition 3 (2014).
- Le capteur de ce produit est conforme aux normes de performance de la FDA pour les produits laser, à l'exception de la conformité à la norme CEI 60825-1 Ed. 3 telle que décrite dans l'avis laser n° 56 du 8 mai 2019.



N'utilisez pas ISA dans les cas suivants:

- Des objets métalliques ou des liquides étrangers ont pénétré dans votre ISA.
- L'ISA émet de la fumée ou des odeurs ou bruits anormaux.
- Le cordon ou la prise d'alimentation surchauffe, est cassé, plié ou autrement endommagé.
- La température ambiante dépasse 35° C.

Toute infraction à ce qui suit peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures:

- Ne pas ouvrir ou modifier l'ISA.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec votre ISA.
- Ne connectez pas de voltages ou de fréquences autres que ceux spécifiés.
- Branchez le câble d'alimentation à fond dans la prise de courant.
- Ne pas brancher ou débrancher le câble d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'endommagez pas le câble d'alimentation en le tournant, le regroupant, le sertissant, le tirant ou le pliant de manière excessive.
- Ne placez aucun objet sur le câble.
- Ne laissez pas l'ISA branché pendant un orage.

Le lieu d'exploitation de votre ISA doit être conforme aux points suivants:

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne placez pas l'ISA dans un endroit instable ou soumis à des vibrations.
- Ne placez pas l'ISA dans un endroit qui devient trop chaud (lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur), humide, poussiéreux ou à l'extérieur.
- Ne placez pas l'ISA sur un tapis.
- Maintenez la zone visible devant l'ISA aussi dégagée que possible. Le blocage du champ de vision du capteur réduit sa performance.
- L'ISA peut être placée n'importe où sur une table. Toutefois, il est recommandé de placer ISA à un angle de 45° à gauche ou à droite devant vous.
- Les meilleures performances sont obtenues lorsque l'ISA est placé directement sur le bureau. Veuillez éviter de placer l'ISA sur d'autres objets, tels que des livres.

SPANISH



Información de seguridad y notas importantes

Este manual contiene información importante y precauciones de seguridad sobre su ISA.
No utilice el ISA de forma distinta a la descrita en este manual, ya que podría provocar un incendio, una descarga eléctrica u otros accidentes inesperados.
Las marcas y declaraciones de las normas de seguridad sólo se aplican a las tensiones y frecuencias admitidas en los respectivos países o regiones.

Contenido:

- 1x ISA
- 1x fuente de alimentación
- 1x manual de instrucciones

© 2021 Deep Care GmbH. Todos los derechos reservados.
Deep Care GmbH, Königsallee 43, 71638, Ludwigsburg, Alemania.
www.deep-care.de

Alimentación:

- Mantenga siempre despejada la zona que rodea al conector de alimentación para poder desconectar fácilmente el cable de alimentación en caso necesario.
- Nunca desconecte el enchufe tirando del cable.

Notas generales:

- No coloque nada encima del ISA. Tenga especial cuidado con las piezas metálicas, como los clips y las grapas, y con los recipientes que contienen líquidos inflamables, como el alcohol o el disolvente.

Producto láser de clase 1:

- Este producto está clasificado como producto láser de clase 1 de acuerdo con la norma EN/IEC 60825-1, edición 3 (2014).
- El sensor de este producto cumple con las normas de rendimiento de la FDA para los productos láser, excepto en lo que respecta a la conformidad con la norma IEC 60825-1 Ed. 3, tal y como se describe en la Notificación sobre el láser nº 56 de fecha 8 de mayo de 2019.



No utilice ISA en los siguientes casos:

- Han entrado objetos extraños metálicos o líquidos en su ISA.
- El ISA emite humo o se producen olores o ruidos inusuales.
- El cable de alimentación o el enchufe se sobrecalienta, está roto, doblado o dañado de alguna manera.
- La temperatura ambiente supera los 35° C.

El incumplimiento de lo siguiente puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones:

- No abra ni modifique el ISA.
- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con su ISA.
- No conecte tensiones o frecuencias distintas a las especificadas.
- Enchufe el cable de alimentación completamente en la toma de corriente.
- No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No dañe el cable de alimentación retorciéndolo, atándolo, tirando de él o doblándolo en exceso.
- No coloque ningún objeto sobre el cable.
- No deje el ISA conectado a la red eléctrica durante una tormenta.

El lugar de funcionamiento de su ISA debe cumplir con los siguientes puntos:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No coloque el ISA en un lugar inestable o sujeto a vibraciones.
- No coloque el ISA en un lugar que se caliente mucho (luz solar directa o cerca de una fuente de calor), húmedo, con polvo o al aire libre.
- No coloque el ISA sobre una alfombra.
- Mantenga la zona visible delante de la ISA lo más despejada posible. El bloqueo del campo de visión del sensor reducirá el rendimiento.
- ISA puede colocarse en cualquier lugar de un escritorio. Sin embargo, se recomienda colocar el ISA en un ángulo de 45° a la izquierda o a la derecha delante de usted.
- El mejor rendimiento se consigue cuando el ISA se coloca directamente sobre el escritorio. Por favor, evite colocar el ISA sobre otros objetos, como los libros.

ENGLISH



Safety Information and Important Notes

This manual contains important instructions and safety precautions about your ISA.

Do not use ISA in ways other than those described in this manual, as this could result in fire, electric shock or other unexpected accidents.

Safety standard markings and declarations apply only to the supported voltages and frequencies in the respective countries or regions.

Delivery Items:

- 1x ISA
- 1x Power Supply
- 1x Operating manual

© 2021 Deep Care GmbH. All rights reserved.

Deep Care GmbH, Königsallee 43, 71638, Ludwigsburg, Germany.

www.deep-care.de

Electricity Supply:

- Always keep the area around the mains supply clear so that you can easily disconnect the power cable if necessary.
- Never disconnect the plug by pulling on the cable.

General Information:

- Do not place anything on the ISA. Be especially careful with metal parts such as paper clips and staples and with containers containing flammable liquids such as alcohol or thinner.

Laser Product Class 1:

- This product is classified as a Class 1 laser product in accordance with EN/IEC 60825-1, edition 3 (2014).
- The sensor in this product complies with FDA performance standards for laser products except for conformance to IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice No. 56 dated May 8, 2019.



Do not use ISA in the following cases:

- Metallic foreign objects or liquids have entered your ISA.
- ISA emits smoke or unusual smells or noises occur.
- The Power cable or plug are overheated, broken, bent or damaged.
- The ambient temperature exceeds 35° C.

Failure to observe the following points may result in a fire, electric shock or injuries:

- Do not open or modify ISA.
- Only use the original Power Supply and cable delivered with your ISA..
- Do not connect the device voltages or frequencies other than those specified.
- Plug the Power cable fully into the power socket.
- Do not connect and disconnect the power supply with wet hands.
- Do not damage the power cable by twisting, bundling, tying, pulling or excessive bending.
- Do not place any objects on the cable.
- Do not leave ISA connected to the mains supply during a thunderstorm.

The location for operating your ISA should comply with the following points:

- Keep out of the reach of children.
- Do not place ISA in a location that is unstable or subject to vibration.
- Do not place ISA in a location that becomes very hot (direct sunlight or near a heat source), humid, dusty or outdoors.
- Do not place the ISA on a carpet.
- Keep the visible area in front of the ISA as clear as possible. Blocking the sensor field of view will reduce performance.
- ISA can be placed anywhere on a desk. However, it is recommended that you place ISA at a 45° angle to the left or right in front of you.
- The best performance is achieved when ISA is placed directly on the desk top. Please avoid placing ISA on other objects such as books

ITALIAN



Informazioni sulla sicurezza e note importanti

Questo manuale contiene importanti istruzioni e precauzioni di sicurezza relative all'ISA.
Non utilizzare l'ISA in modi diversi da quelli descritti nel presente manuale, poiché potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o altri incidenti imprevisti.
I marchi e le dichiarazioni di sicurezza si applicano solo alle tensioni e alle frequenze supportate nei rispettivi Paesi o regioni.

Delivery Items:

- 1x ISA
- 1x Alimentazione
- 1x Istruzioni per l'uso

© 2021 Deep Care GmbH. Tutti i diritti riservati.

Deep Care GmbH, Königsallee 43, 71638, Ludwigsburg, Germania.

www.deep-care.de

Alimentazione:

- Mantenere sempre libera l'area intorno al collegamento di rete, in modo da poter scollegare facilmente il cavo di rete in caso di necessità.
- Non scollegare mai la spina tirando il cavo.

Note generali:

- Non collocare nulla sull'ISA. Prestare particolare attenzione alle parti metalliche, come graffette e punti metallici, e ai contenitori contenenti liquidi infiammabili, come alcol o diluenti.

Prodotto laser di classe 1:

- Questo prodotto è classificato come prodotto laser di Classe 1 in conformità alla norma EN/IEC 60825-1, edizione 3 (2014).
- Il sensore di questo prodotto è conforme agli standard di prestazione della FDA per i prodotti laser, ad eccezione della conformità alla norma IEC 60825-1 Ed. 3, come descritto nell'Avviso sui laser n. 56 dell'8 maggio 2019.



Non utilizzare ISA nei seguenti casi:

- Oggetti estranei metallici o liquidi sono entrati nell'ISA.
- L'ISA emette fumo o si verificano odori o rumori insoliti.
- Il cavo di alimentazione o la spina si surriscaldano, sono rotti, piegati o danneggiati in altro modo.
- La temperatura ambiente supera i 35° C.

La mancata osservanza dei seguenti punti può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni:

- Non aprire o modificare l'ISA.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di rete fornito con l'ISA.
- Non collegare tensioni o frequenze diverse da quelle specificate.
- Inserire completamente il cavo di rete nella presa di corrente.
- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non danneggiare il cavo di rete attorcigliandolo, legandolo, tirandolo o piegandolo eccessivamente.
- Non collocare alcun oggetto sul cavo.
- Non lasciare l'ISA collegato alla rete elettrica durante un temporale.

Il luogo di funzionamento dell'ISA deve essere conforme ai seguenti punti:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non collocare l'ISA in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni.
- Non collocare l'ISA in un luogo molto caldo (luce solare diretta o vicino a una fonte di calore), umido, polveroso o all'aperto.
- Non collocare l'ISA su un tappeto.
- Mantenere il più possibile libera l'area visibile davanti all'ISA. L'ostruzione del campo visivo del sensore riduce le prestazioni.
- ISA può essere posizionato ovunque in una scrivania. Tuttavia, si consiglia di posizionare l'ISA con un angolo di 45° a sinistra o a destra di fronte a voi.
- Le prestazioni migliori si ottengono quando ISA viene posizionato direttamente sul piano della scrivania. Evitare di posizionare l'ISA su altri oggetti come i libri.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.