

USER'S MANUAL

Wireless Doorbell





Thank you for purchasing this product, please read before use (Keen this manual for future reference)

Model CA-DB is an accessory for the CentralAlert™ Visual Alert System. It is a wireless doorbell to be used as an alternative to the house's regular doorbell, or as an additional doorbell (i.e., for a side or back door). When pushed, it sends a wireless signal to activate a CentralAlert™ Master-

Registering Model DB (an extra

doorbell): Model CA-SOS must be learned by a Master-Unit in order to work with the system.

Unit


With the **SET** switch in **RUN** position, press and hold the "SOS/Test" button on the Master-Unit for about 5 seconds. The digital display shows "LEAr."

- 2. Press and hold the CA-DB's button for about 5 seconds until the Master-Unit display reads "dr - n" where "n" is the doorbell number.
- 3. Registration is now complete. Press the "SNOOZE/RESET" button on the Master-Unit to end the Learn mode.

Testing:

- Press the Model CA-DB's button & verify that its transmit indicator flashes.
- 2. Confirm that the Master-Unit activates all alerting outputs in response.

Installation:

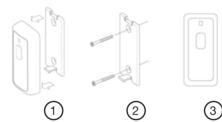

- Press on latch to separate doorbell from plate.
- 2. Mount plate to door or wall user provides 2 small screws.
- 3. Snap door-bell back on to the plate.

Transmit Indicator

Specifications:

Smart-Code

construction.


Push Button -

Advanced Technology: 2.4 Ghz

open space – actual distance

2. Operating range: Up to 200 ft,


varies according to house

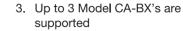

- 4. Battery type: 3 net coin battery (2032 type)
- 5. Battery life: up to 10 months
- 6. Operating temperature: +10 to +30°C
- 7. Size: 2.5" x 3.8" x 1" Wt: 4 Oz
- 8. Spec is subject to change

Notes:

1. Change battery - remove the old battery first. Pay attention to the battery orientation - the coin battery is in correct position when the writing on it is face up (towards you, as you look at it).

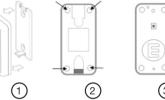

- Press on latch to separate doorbell from back plate.
- 2. Unscrew screws from corners. separate center section from
- 3. Slide coin battery all the way into battery compartment; reassemble unit.

Copyright © 2011 Serene Innovations, Inc. All rights reserved. 08-11 Rev.1 A













Manuel d'utilisation Sonnette Sans fil



Guide d'exploitation

Merci d'avoir acheté ce produit. S'il vous plaît lire avant d'utiliser Gardez ce manuel pour référence future)

Le modèle CA-DB est un accessoire optionnel pour le Système Visuel d'Alerte CentralAlert™. Il s'agit d'une sonnette de porte sans fil à utiliser à la place ou en plus d'une sonnette de porte régulière (pour une porte arrière ou de côté). Lorsque le bouton de la sonnette est pressé, un signal sans fil est envoyé afin d'activer l'Unité-Maîtresse d'un CentralAlert[™]

Enregistrement du modèle CA-DB

(une sonnette supplémentaire): Cet accessoire optionnel doit être enregistré par une **Unité-maîtresse** afin de fonctionner avec le système.


Presser et maintenir enfoncée la touche "SOS/Test" de l'Unité-Maîtresse pendant environ 5 secondes afin de placer cette dernière en mode d'enregistrement. L'écran numérique affichera "LEAr."

- (Le bouton Time SET doit être à la position RUN)
- Presser et maintenir enfoncé le bouton du CA-DB pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que l'écran de l'Unité-Maîtresse affiche "dr - n". "n" représentant le numéro de la sonnette.
- 3. L'enregistrement est maintenant terminé. Presser la touche "SNOOZE / RESET" sur l'Unité-Maîtresse afin de auitter le mode d'enreaistrement.

Mise à l'essai:

- Presser le bouton du CA-DB et vérifier que son indicateur de transmission (TRANSMIT) clianote.
- Assurez-vous que CentralAlert^{MC} active toutes les sorties d'alerte en mode réponse.

Installation:

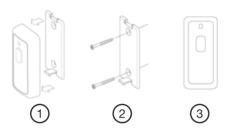

- Appuvez sur le taquet pour séparer la sonnette de la plaque de montage
- 2. Installer la plaque sur la porte ou sur le mur à l'aide de deux petites vis (non incluses)
- 3. Replacer la sonnette sur la plaque de montage

Indicateur de transmission

Bouton poussoir —

Spécifications:

- 1. Technologie avancée: 2.4 Ghz Smart-Code
- Portée de transmission: Jusqu'à 200 pieds, espace ouvert - la distance peut varier selon le type de construction de la maison.
- 3. Jusqu'à 3 modèles CA-DB et CA-DX sont supportés par un système.
- 4. Type de pile: Une pile au lithium de grosseur 2032

- Durée des piles: jusqu'à 10 mois
- 6. Température d'utilisation: de +10 à
- Dimensions: 2.5" x 3.8" x 1" Poids: 4 Oz
- Spécifications sujettes à changement

Notes:

1. Remplacement de la pile - retirer tout d'abord l'ancienne pile. Soyez attentif à l'orientation de la pile - la pile est bien positionnée lorsque l'écriture sur sa surface se trouve face vers le haut (vers vous lorsque vous la regardez).







- Technologie avancée: 2.4 Ghz Smart-Code
- 2. Portée de transmission: Jusqu'à 200 pieds, espace ouvert – la distance peut varier selon le type de construction de la maison
- 3. Jusqu'à 3 modèles CA-D



Toll Free: 866-376 9271. Fax: 560-483-2087 Website: www.sereneinnovations.com Email: Customercare@Sereneinnovations.com

Copyright © 2011 Serene Innovations, Inc. All rights reserved, 08-11 Rev.1

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.