

说明书尺寸：65x100mm

材质：128g双铜 骑马钉(封面内侧空白页)

VISUAL BLACKHEAD VACUUM DEVICE

可 视 化 黑 头 仪



Please read this manual in details and keep it under proper custody  
使用前请仔细阅读本使用手册



简体中文

## 使用手册

非常感谢您购买本产品，为确保正确、安全使用，请您使用前仔细阅读并妥善保管此使用手册。

手册使用的图例仅供参考，请以实际产品为准。

## 注意事项

为了您正确使用本产品，请仔细阅读并遵守以下安全指南。

- 本产品为不防水，请勿将产品浸泡在任何形式的液体中。不要在盛水的浴缸、淋浴盆、洗脸盆或其他盛水器附近使用产品，请保持产品及电源适配器干燥状态。
- 使用产品之前，请将手上的水或其它液体擦干，以免水或者其他液体进入产品内部，损坏产品。
- 请勿在同一区域过度使用，可能会导致皮肤变红和肿胀。建议在同一区域的停留时间不超过3秒，每次护理时间不超过5分钟。
- 请勿在受伤或脆弱的皮肤上使用，如下巴、嘴角和眼周等脆弱区域。
- 请勿在有开放性伤口、痤疮或丘疹的皮肤上使用。
- 请勿在切伤、进行过整容手术的部位、皮肤发炎、发痒泛红等部位使用。
- 如果您在使用时，感觉不适，请立即停止使用。
- 长时间连续使用机身若出现发热现象，该现象非产品故障，请放心使用。
- 使用产品后，皮肤可能会变红，属于正常现象，一般1小时内红印会自行消退。
- 请勿在近距离内直视运行的LED。
- 如果您有任何皮肤问题，请在使用本产品之前先咨询医生。
- 请将产品置于儿童触及不到的地方，勿让儿童使用，会引起事故和受伤。
- 若产品已经损坏，请勿继续使用。

## 产品介绍

### ◎ 产品简介

可视化黑头仪采用无创真空负压技术，搭配四种专用吸头，能有效帮助去除黑头、粉刺、污垢和老化角质，净透毛孔改善肌肤。内置高清摄像头，能直观监测皮肤状况，清晰观测黑头被去除的过程，避免盲目清洁或漏清洁皮肤，同时带有蓝光护理功能，五档吸力满足不同使用需求。



标准吸头



区域吸头



精准吸头




单点吸头



## 产品结构

### ◎主机

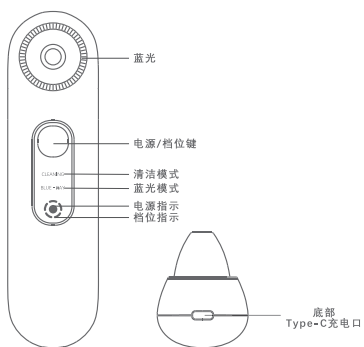


### ◎吸头配件



## 产品功能

- 长按“电源/档位键” 1S，电源开启，并进入待机状态，电量&充电指示灯常亮；
- 双击“电源/档位键”，可以在“清洁模式-蓝光模式-待机”之间循环切换，同时电量&充电白灯和相对应的模式指示灯常亮；
- 在“清洁模式”下，短按“电源/档位键”，可以在“1档-2档-3档-4档-5档-0档”之间循环切换，同时电量&充电白灯、“清洁模式”指示灯和相对应的档位指示灯常亮；
- 每个模式工作5分钟进入待机模式，若待机5分钟内无使用任何操作，产品将自动关机；
- 任意工作状态下，长按“电源/档位键” 1S，仪器关机，进入休眠状态。

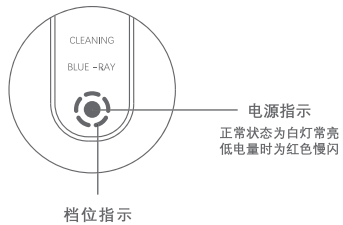



## 操作步骤

### ◎ APP下载安装

使用手机扫一扫使用手册中的二维码后，点击下载并安装即可。  
(如使用微信扫一扫，需手动跳转到浏览器打开)



IOS系统与Android系统通用

### ◎ APP功能说明

通过APP连接仪器的摄像头，在使用过程中更加直观方便地进行毛孔清洁。


- ① 打开仪器，然后打开手机设置页面选择仪器对应的WIFI名称(如：UDU Beauty-xxxx)，并连接。

- ② 打开“UDU”APP后进入首页，如未连接上设备，APP将出现操作指引提示。
- ③ 点击“开启”后即可在APP视窗内看到仪器摄像头传输的图像。



(如图所示)

- ④ 使用时可根据显示脸部皮肤的情况，适当调整黑头仪工作位置。
- ⑤ 点击“录像”后可将仪器摄像头传输的图像保存至手机中。

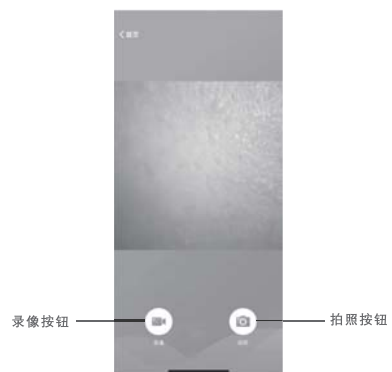


(如图所示)


- ⑥ 点击“拍照”后可将仪器摄像头传输的图像以照片的方式保存至手机中。
- ⑦ 在使用完后直接手机后台关闭APP即可。

## 护理方法

- ① 下载并安装APP（具体详见APP下载安装步骤）
- ② 用手机APP连接仪器（具体详见APP功能说明）
- ③ 使用前先清洁面部，用热毛巾热敷或者使用蒸脸器帮助毛孔打开，再用黑头导出液软化黑头，即可轻松吸出黑头。
- ④ 选择适合自己需求的吸头，安装在仪器顶部并在手掌或前臂测试吸力大小后，再使用。
- ⑤ 使用时可以根据自身皮肤状况短按按键选择合适的档位：1档-2档-3档-4档-5档。
- ⑥ 使用时确保吸头紧贴皮肤，切勿有缝隙，否则不会形成真空负压。

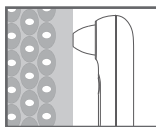

√

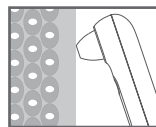

x

- ⑦ 使用仪器时保持移动，在同一部位的停留时间不要超过3秒，每次使用时间不超过5分钟，5分钟后进入待机模式，待机5分钟内无操作将自动关机。
- ⑧ 清洁完成后，可双击切换到蓝光模式下，对肌肤进行蓝光护理。
- ⑨ 使用完毕后，长按电源键关闭仪器，可以对皮肤进行冰敷，或搭配使用毛孔收敛液镇静皮肤。
- ⑩ 面部护理建议每周1-2次。

## 充电与指示

- ① 仪器第一次使用前请先充满电。
  - ② 请选用标准合格的DC5V/1A适配器进行充电。
  - ③ 充电过程中电源指示白灯呼吸闪烁。
  - ④ 充满后电源指示白灯常亮。
  - ⑤ 低电时电源指示红灯慢闪，请充满电后再使用。
- ※连接充电10秒后仍未开始时，请确认Type-C线插接是否有接触不良或电源供电是否正常。

## 清洁与保养

- ① 清洁时请确保仪器处于关机状态，不能水洗，避免触电。
- ② 清洁吸头时，请先将吸头从仪器上取下来，并用温水冲洗。
- ③ 仪器不防水，每次使用后可用湿纸巾或湿布擦拭干净机身，切勿用水冲洗。
- ④ 仪器摄像头镜片用棉签进行清洁，禁止用硬物触碰镜片。
- ⑤ 禁止使用腐蚀性溶液擦拭机身。
- ⑥ 请将仪器置于正常干燥室内环境存放。
- ⑦ 严禁自行拆卸仪器，若出现任何故障或不能正常使用，请停止使用并联系在线客服。

## 产品规格

品 名：可视化黑头仪	型 号：DZ06
额定输入：DC5V/1A	额定功率：3W
电池容量：1000mAh/3.7V	产品尺寸：155.8×42×53.4mm
执行标准：GB 4706.1-2005	GB 4706.15-2008

## 产品中有害物质和名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
PCBA	x	○	○	○	○	○
气泵	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
Type-C充电线	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
密封圈	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○


 本表格依据SJ/T11364的规定编制  
 ○：表示该部件的材料有害物质含量符合GB/T26572规定的限量要求以下。  
 x：表示该部件的材料有害物质含量超出GB/T26572的规定要求。  
 注：含有毒有害或元素的部件皆因全球发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代品。

## 常见问题及回答

Q: 为什么吸不出黑头?

A: ① 正常情况下毛孔保持闭合状态, 使用前建议热敷或者使用蒸脸器帮助毛孔打开, 再用黑头导出液软化黑头, 即可轻松吸出黑头;  
② 根据自身皮肤状况选择合适的吸头以及档位。

Q: 为什么会吸出红印?

A: 由于真空负压的吸力作用, 吸完后皮肤会轻微泛红, 属于正常现象, 一般1小时内会散去, 建议使用仪器时, 在同一部位停留时间不超过3秒, 使用后可对皮肤进行冰敷, 或搭配使用毛孔收敛液镇静皮肤。

Q: 使用中感觉到痛?

A: ① 请选择较低档位的吸力;  
② 请选择较小的吸头;  
③ 请在使用过程中保持移动, 同一部位的停留时间不超过3秒;  
④ 每次使用时间不宜超过5分钟。

Q: 多久用一次?

A: 敏感肌和干性皮肤一周一次, 油性和混合性肌肤一周使用两次。

Q: 怎样选择合适的档位?

A: 使用仪器前可在手上检测吸力, 然后用于脸部, 建议从“1档”开始测试, 逐渐调整到合适档位。

Q: 为什么连接不上手机APP?

A: ① 请确保仪器已被开启;  
② 点开手机设置页面选择仪器对应的WIFI名称(如: UDU Beauty-xxxx), 并连接。

Q: 为什么APP一直闪退?

A: 可能是仪器电量不足, 请给仪器充满电后再进行尝试。

Q: 充满电可以使用多久?

A: 连接手机使用的情况下, 可连续使用90分钟, 未连接手机使用的情况下, 可连续使用150分钟。

## 保修条例

本产品的保修期限按所销售的对应的国家可能存在不同时长，我们会在该国法律允许的情况下尽量做延长。

- 本产品的保修期限为自购买之日起1年。附带配件保修为自购买之日起1年。
- 如果产品在保修期内出现质量问题，将给予免费维修或更换。但将由按您不正当使用或者不规范操作带来的产品损坏，不在保修范围内，照本价格为您更换损坏部件或以旧换新。旧产品所有权归厂家所有。
- 请在您需要保修时出示您的保修卡。本产品的保修日期按您购买时的日期为起始日期，如果您没有购买日期，将按出厂日期计算。

### 以下情况，厂家可能不提供保修或退换货

厂家不承担为您补发购机发票及保修卡，请自行保管好您的购机发票及保修卡。

- ① 对于火灾、地震、洪水等不可预测事件引起的产品损害。
- ② 您的过失、误用、其他异常条件下的使用等引起的产品故障及损坏。
- ③ 您的自行拆卸及保管不当（如鼠害或液体渗入等）造成的产品损坏。
- ④ 在非产品使用环境中强制使用产品造成的损坏，包括但不限于超出工作负荷等。
- ⑤ 其他无法控制的情况下造成的产品损坏。
- ⑥ 对于产品的作用或使用的附随性损坏（如您的事业利益损坏，事业的中断，使用产品造成的其他损失，使用仪器需要更换设备、装置或服务所产生的成本，您的顾客索赔需求等），厂家不承担该项造成的任何责任。



## 用户保修凭证

为了给您提供更好的服务，请完善您的个人信息

保修期	自购买一年内	商品到货日期 年 月 日
	客户地址	
客户	客户姓名	
	购买ID	
	微信号	
保修原因		
维修记录		



E n g l i s h

## Instruction Manual

Thanks for purchasing the product. In order for convenient and correctly use, please read this manual in details and keep it under proper custody.

The illustrations used in the manual are for reference only,  
please refer to the actual product.

## Precautions

**In order to correctly use this product, please read and comply with the following safety instructions.**

- This product is not waterproof, please do not immerse the product into any form of liquid. Please do not use the product near any bathtubs, shower trays, wash basins or other containers that contain water, and please keep the product and power adaptor dry.
- Before using the product, please wrap your hands dry in order to avoid that water or any other fluids enter the inside of the product, otherwise it may damage the instrument. Please do not excessively extract a skin area, otherwise it may lead to blushing and swelling of your skin.
- It is recommended not to keep the product operating on one area for more than 3 sec, and the duration of each treatment shall not exceed 5 min.
- Please do not use on injured or fragile skin, and on the chin, mouth or in fragile areas such as corners and around the eyes.
- Please do not use the product at skin areas with open wounds, acnes or papules.
- Do not use it on cut wounds, areas that have undergone cosmetic surgery, areas where the skin is inflamed, itchy and red.
- If you don't feel comfortable, please immediately stop using the product.
- Continuous use of the product for a long time will cause heat, this phenomenon is not a product failure, please feel free to use.
- Following treatment with the product, your skin may turn red, which is normal and will fade away naturally within 1 hour.
- Do not look directly at the running LED at close range.
- If you are exposed to any skin problems, please consult your doctor before using the product.
- Keep the product out of children's reach. Do not let children use it. Will cause accidents and injuries.
- If the product is damaged, please do not use it.

## Product Introduction

### © Product Description

Visual blackhead vacuum device adopts non-invasive vacuum negative pressure technology, equipping with 4 special silicone sucker to effectively remove blackheads, acnes, dirt, aging cuticles and completely purge pores clean. Built-in high-definition camera technology is designed to intuitively monitor skin conditions and clearly observe the blackhead suction process and avoid aimless cleaning or uncovered cleaning. At the same time time with blue light care function, and five levels of suction to meet different needs.



Standard Sucker



Area Sucker



Precision Sucker




Specific Sucker



## Product Structure

### ◎ Main Body

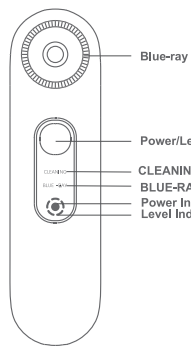

Blue-ray

Power/Level Button

CLEANING Mode

BLUE-RAY Mode

Power Indicator Level Indicator



Bottom of the Type-C Port

### ◎ Suction Fittings



**Standard Sucker**

Minor suction, adaptable to minor parts that can't be easily operated by the elliptical-hose sucker.



**Area Sucker**

Powerful suction, adaptable to the T area on the face.



**Precision Sucker**

Specifically designed for treatment of obstinate blackheads




**Specific Sucker**

Specifically designed for treatment of extremely obstinate blackheads

## Product Function

- Press the " Power/Level " button for 1 sec, the power will be on and instandby, power & charging indicator white light always on;
- After the instrment is turned on, double-click the button to cycle through the modes: CLEANING / BLUE-RAY, then the power & charging indicator and mode corresponding indicator will be on;
- In "CLEANING Mode", press the " Power/Level " button to " Level 1-Level 2-Level 3-Level 4-Level 5 " between loops, then mode and level corresponding indicator will be on;
- Work each level for 5 minutes to enter standby state, if standby for 5 minutes, if no operation is used, the instrument will shut down automatically;
- In any working state, long press the " Power/Level " button for 1 sec for the instrument, shut down and enter the sleep status.

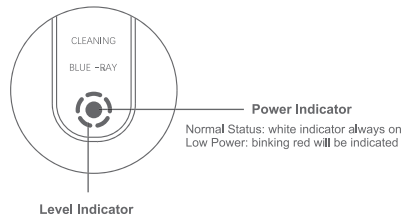

## Operation Steps

### ◎ APP Download and Install

Scan the QR code in the instruction manual using your mobile, click to download and then stall the program.  
(If you scan the QR code by WeChat, you need to switch to the browser manually to open it.)



Common to IOS and android system

### ◎ APP Function Description

Connect the camera of this instrument through APP, it is more intuitive and convenient to clean pores during use.

- ① Turn on the instrument, and Wifi in setting in your phone, then connect to the right Wifi of the instrument (e.g. UDU Beauty-xxxx).




- ② Open the APP and then entering the home page, If the device is not connected, the APP will display the operation instruction promptly.
- ③ Click " Start up " to see the image transmitted by the camera of the blackhead instrument in the app window.



(As shown in the figure)

- ④ When using, the working position of the instrument can be adjusted properly according to the skin condition of the face.
- ⑤ Click " video " to save the image transmitted by the camera of the instrument to the mobile phone.

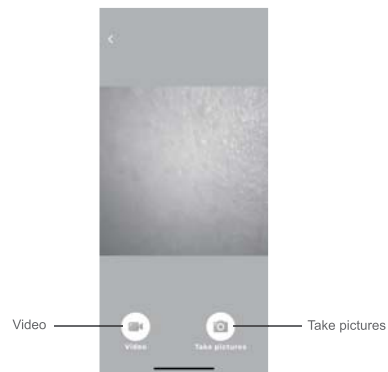


(As shown in the figure)


- ⑥ Click "take pictures" to save the image transmitted by the camera of the instrument to the mobile phone in the form of a picture.
- ⑦ Close the APP directly in the background after use.

## Nursing Method

- ① Download and install the APP. (for specific step, please check the APP software download procedure)
- ② Connect the instrument with mobile APP. (for specific step, please check the APP function description)
- ③ Following basic facial cleaning, use the facial vaporizer to steam the face to expand the pores, or use the blackheads extraction fluid to drive out the softened blackheads.
- ④ Use an appropriate sucker to install it on the top of the instrument, and test the suction in the palm or forearm.
- ⑤ Select appropriate suction force based on the skin conditions:  
" Level 1 - Level 2 - Level 3 - Level 4 - Level 5 "
- ⑥ Make sure that the sucker is attached to the skin, and leave no gaps, otherwise vacuum negative pressure will not be formed.

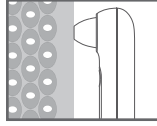

✓

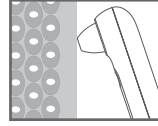

✗

- ⑦ Keep moving when using the instrument, and do not keep the product at one position for too long. The duration of each operation shall not exceed 5min, the product will be automatically shut down without operation within 5 min under the standby mode.
- ⑧ After cleaning, you can double click to switch to BLUE-RAY mode to perform blue light care on your skin.
- ⑨ Following long-time operation, press the power key to shut the instrument, then you may use ice compress or pore convergence serum to sedate the skin.
- ⑩ Facial care is recommended 1-2 times a week.

## Charging and Indicator

- ① Please fully charge the instrument before the first use.
  - ② Please select standard (DC5V/1A) qualified adapter for charging.
  - ③ The white power indicator flashes slowly during charging.
  - ④ The white power indicator will be permanently on when fully charged.
  - ⑤ The red power indicator will be blinking when low power; blinking red will be indicated; Please use it after full charge.
- \* If the connection has not started after 10 seconds of charging, please confirm whether the the type-C wire is plugged in or whether the power supply is normal.

## Cleaning and Maintenance


- ① Please make sure that the instrument is shut off, and do not wash the instrument to avoid electric shock.
- ② When cleaning the sucker, please first remove the sucker form the instrument, and rinse the sucker with warm water.
- ③ The main body of the instrument is not waterproof but can be wrapped clean with wet wipes or damp cloth. Please do not directly rinse it under any water tap or in any dishwasher.
- ④ The instrument camera lens shall be cleaned with cotton swabs, and it is forbidden to touch the lens with hard objects.
- ⑤ Do not use corrosive solution to wipe the body.
- ⑥ Please store in a normal dry room.
- ⑦ Do not privately dismantle the instrument; in case of any fault or if the product can't be used, please do not use it, and contact the online customer service personnel.

## Product Specification

Product Name: Visual blackhead vacuum device  
 Product Type: DZ06  
 Rated Input: DCSV/1A  
 Rated Power: 3W  
 Battery Capacity: 1000mAh/3.7V  
 Product Size: 155,8x42x53,4mm  
 Executive Standards: GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008

## Hazardous Substance

Part Name	Hazardous Substance					
	Lead(pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Plastic Parts	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
Air Pump	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Type-C Cable	○	○	○	○	○	○
Sealing Ring	○	○	○	○	○	○
Packing Material	○	○	○	○	○	○
Screw	○	○	○	○	○	○


 This sheet is prepared in accordance with SJ/T 11364.  
 ○: It indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit requirement specified in GB/T 26572.  
 X: It indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous materials of the part exceeds the limit requirement specified in GB/T 26572.  
 Notes: Replacement of the parts containing hazardous and toxic substances or elements can't be realized due to constraints of the global development level.

## FAQ And Answers

**Q: Why can't the blackheads be extracted?**

- A: ① In normal cases, pores are kept shut. Before using the product, it is recommended to apply hot compress or use the facial vaporizer to expand the pores, and then use the blackhead extraction fluid to soften and simply extract the blackheads.
- ② Use an appropriate sucker and select appropriate suction force based on the skin conditions.

**Q: Why can red seal be formed?**

A: Due to the suction force of vacuum negative pressure, the skin will be slightly flushed following extraction, which is normal and will fade away within 1 hour. It is recommended not to keep the product on one skin area for more than 3 sec when using the product. Ice compress can be conducted following operation of the product or pore convergence fluid can be used additionally.

**Q: Why is it painful during use?**

- A: ① Please apply a lower level of suction force;
- ② Please select a smaller sucker;
- ③ Please keep moving during operation, and do not keep the product on one part for more than 3 sec;
- ④ The duration of each operation shall not exceed 5 min.

**Q: What is the use frequency?**

A: Once in a week for sensitive skin and dry skin, twice a week for oily and mixed skin.

**Q: How to select an appropriate level?**

A: Before using the instrument, please check the suction force with your hands, and then gradually adjust it to the appropriate level.

**Q: Why can't the mobile APP be connected?**

- A: ① Please ensure that the visual blackhead vacuum device is turned on.
- ② Wifi in setting in your phone, then connect to the right Wifi of the instrument.

**Q: Why does the APP always about abruptly?**

A: Probably due to low product battery, please try again once the product is fully charged.

**Q: How long can it be operating once it is fully charged?**

A: It can be operating continuously for 90 min when it is connected to the mobile and for 150 min when it is not connected to the mobile.

## Warranty Rules

The warranty period of the product may be varied, dependable on the country in which the product is marketed. And we will extend the warranty period within the limit allowable by the laws of China.

- The warranty period of the product is one year from the date of purchase. The warranty period of the accessory is one year from the date of purchase.
- If any quality defect of the product is identified during the warranty period, UDU will provide repair or replacement without charge. Product damage due to improper use or non-normalized operation is not covered by the warranty, UDU will replace the damaged parts on original costs. The ownership of the original product is owned by UDU.
- Please present your warranty card when you need warranty service. The warranty period of UDU product commences from the date of purchase, which shall be the ex-factory date if without the date of purchase.

### For the following circumstances, UDU may refuse to provide warranty or replacement service

UDU will not provide any substitutive purchase invoice and warranty card, please keep them under proper custody.

- ① Product damage as a result of fire, earthquake, flood and other unpredictable incidents.
- ② Instrument failure and damage due to your misuse, mis-operation and other use failure under abnormal conditions.
- ③ Product damage due to your private dismantling and improper custody (e.g. Intrusion of rodent pests or fluids).
- ④ Product damage due to forced use of the product in non-operating environment, including without limitation to out-of-limit operation load.
- ⑤ Product damage in circumstances non-controllable by UDU.
- ⑥ Collateral damage due to use or operation of the product (e.g. business interest loss, business interruption and other losses incurred by product operation, replacement costs of parts, components or services for use of the product, your customer claim requirement, etc. ), UDU will not assume any liability thereto.





VISUAL BLACKHEAD VACUUM DEVICE

**D Z 0 6**

**FCC Caution:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.