

NOTE: "INDUSTRY CANADA ID: 1016B8E1587"
will be revised to read "IC: 1016B-8E1587"

REVISION RECORD				
REV	ECO	DATE	DESCRIPTION	DRFT
A	CN0003420	03/17/2003	RELEASE TO PRODUCTION	BEN
B	CN0003766	05/08/2003	REWORK FCC STATEMENT FOR CLASS "A" DEVICE ADD FCC AND CANADIAN NUMBERS	BEN

WARNING
INVISIBLE LASER RADIATION PRESENT WHEN OPEN.
Avoid direct exposure to beam. Exposure to laser light may result in permanent eye damage.
Bypassing interlocks other than the service interlock will allow system to run with the laser energized!
Removal of the cover should only be done by service personnel authorized by Kodak Health Imaging.
Please Do Not perform operations or adjustments which are not specified in the user manual.

開放すると不可視レーザー光が露出されます。
光線を直接見ないでください。レーザー光は目に永久に損傷を及ぼす可能性があります。レーザー光はインターロック以外のインターロックをバイパスした場合はレーザーが作動し続ける可能性があります。
カバーの取り外しはコダックヘルスイメージングの認定サービス技術者以外には行わないでください。
ユーザーマニュアルに記載されていない操作や調整は絶対に行わないでください。

WARNING
HAZARDOUS VOLTAGE
Can cause severe injury or death.
Disconnect power before servicing machine.

危険な電圧
傷害事故、または死亡事故が起きる可能性があります。
機器をサービスする前に必ず電源をオフしてください。

CAUTION
STATIC SENSITIVE EQUIPMENT
Connect a personal grounding strap to appropriate ground before servicing this machine.

静電気敏感性機器
この機器をサービスする前にパーソナルアースストラップで接地してください。

CLASS 1 LASER
クラス 1 レーザー

CAUTION
THIS EQUIPMENT GENERATES, USES, AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY. IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, IT MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS.

この機器は無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があります。使用法に明記されている方法で設置および使用されていない場合、無線伝導障害を起こす可能性があります。

FCC: THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.
CONTAINS FCC ID: PA48E187

• THIS CLASS A DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES 005

• CET APPAREIL NUM ÉRIQUE DE LA CLASSE A EST CONFORME À LA NORME NMB-005 DU CANADA

CONTAINS IC: 1018B-NR187

THIS PRODUCT COMPLIES WITH CCRH REGULATION 21 CFR SUBCHAPTER J.

製品名: 医療診断用イメージャ
販売名: Kodak DryView 8900 レーザー イメージャ
輸入販売業者および住所: コダック株式会社 〒109-8604 東京都中央区日本橋小網町6-1
医療用具輸入許可番号: 13B76050

WARNING
INVISIBLE LASER RADIATION PRESENT WHEN OPEN.
Avoid direct exposure to beam. Exposure to laser light may result in permanent eye damage.
Bypassing interlocks other than the service interlock will allow system to run with the laser energized!
Removal of the cover should only be done by service personnel authorized by Kodak Health Imaging.
Please Do Not perform operations or adjustments which are not specified in the user manual.

開放すると不可視レーザー光が露出されます。
光線を直接見ないでください。レーザー光は目に永久に損傷を及ぼす可能性があります。レーザー光はインターロック以外のインターロックをバイパスした場合はレーザーが作動し続ける可能性があります。
カバーの取り外しはコダックヘルスイメージングの認定サービス技術者以外には行わないでください。
ユーザーマニュアルに記載されていない操作や調整は絶対に行わないでください。

WARNING
HAZARDOUS VOLTAGE
Can cause severe injury or death.
Disconnect power before servicing machine.

危険な電圧
傷害事故、または死亡事故が起きる可能性があります。
機器をサービスする前に必ず電源をオフしてください。

CAUTION
STATIC SENSITIVE EQUIPMENT
Connect a personal grounding strap to appropriate ground before servicing this machine.

静電気敏感性機器
この機器をサービスする前にパーソナルアースストラップで接地してください。

CLASS 1 LASER
クラス 1 レーザー

CAUTION
THIS EQUIPMENT GENERATES, USES, AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY. IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, IT MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS.

この機器は無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があります。使用法に明記されている方法で設置および使用されていない場合、無線伝導障害を起こす可能性があります。

FCC: THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.
CONTAINS FCC ID: PA48E187


• THIS CLASS A DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES 005

• CET APPAREIL NUM ÉRIQUE DE LA CLASSE A EST CONFORME À LA NORME NMB-005 DU CANADA

CONTAINS IC: 1018B-NR187

THIS PRODUCT COMPLIES WITH CCRH REGULATION 21 CFR SUBCHAPTER J.

製品名: 医療診断用イメージャ
販売名: Kodak DryView 8900 レーザー イメージャ
輸入販売業者および住所: コダック株式会社 〒109-8604 東京都中央区日本橋小網町6-1
医療用具輸入許可番号: 13B76050



USE DIE LINE for 8E4630 REV. B

- MATERIALS:**
- MATERIAL: GENERAL ELECTRIC LEXAN 8835 0.010 MIL MATTE VELVET POLYCARBONATE WITH 3M 468MP ADHESIVE OR 3M #9505 ADHESIVE
 - LABEL TO BE MADE PER ELECTRONIC ARTWORK SUPPLIED BY CUSTOMER IN PICT, EPS AND FREEHAND FORMATS (MAC).
 - OVERLAY MATERIAL MUST MEET THE REQUIREMENTS OF UL STANDARD 969 (MARKING AND LABELING SYSTEMS [PGDQ2]).
 - SUPPLIER ARTWORK TO BE APPROVED BY CUSTOMER PRIOR TO PRINTING.
- SUPPLIER REQUIREMENTS:**
- SUPPLIER MUST USE UL RECOGNIZED PRINTING PROCESS PER UL STANDARD 969 (MARKING AND LABELING SYSTEMS [PGDQ2])
 - UL RECOGNIZED SUPPLIERS MUST INDICATE COMPLIANCE TO UL STANDARD 969 BY MARKING THE SMALLEST LOT SIZE WITH THE FOLLOWING:
A. UL FILE NUMBER
B. SUPPLIER'S NAME AND/OR TRADEMARK
C. KODAK PART NUMBER AND REVISION
D. DATE OF PRODUCTION
 - NON-UL RECOGNIZED SUPPLIERS MUST INDICATE COMPLIANCE TO UL STANDARD 969 BY SUPPLYING, WITH EACH SHIPMENT, A DOCUMENT INCLUDING THE FOLLOWING INFORMATION:
A. SUPPLIER'S NAME
B. A STATEMENT INDICATING COMPLIANCE TO UL STANDARD 969
C. KODAK PURCHASE ORDER NUMBER AND QUANTITY.
D. KODAK PART NUMBER AND REVISION.
E. DATE INSPECTED AT SUPPLIER AND SIGNATURE OF AUTHORIZED INSPECTOR.

- LABEL NOTES:**
- COLORS USED:**
- White Substrate
 - PMS Black
 - PMS #485-CVC Red
 - PMS #123-CVC Yellow
 - DIE LINE

SAMPLE HOST DEVICE LABEL

255.64 REFERENCE

340.40

89.35 REFERENCE


134.14

R 1.5 TYPICAL

Art Work for 8E4630 REV. B

EASTMAN KODAK COMPANY OAKDALE, MN MODEL 8900 DRFT BE. NELSON DATE 10/18/02 ENG J. GILBERTSON DATE 10/18/02		THIS IS AN UNPUBLISHED WORK THAT IS EASTMAN KODAK COMPANY RESTRICTED INFORMATION. DISCLOSURE, USE OR REPRODUCTION WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION OF EASTMAN KODAK COMPANY IS PROHIBITED. IF PUBLICATION OCCURS, THE FOLLOWING NOTICE APPLIES: COPYRIGHT (c) 2003, EASTMAN KODAK COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED.	
TOLERANCES EXCEPT AS NOTED 0 ± 1 MM .0 ± 0.5 .00 ± 0.26 ANGLES ± 0.5 MATERIAL SEE NOTES FINISH SEE NOTES		TITLE LABEL-WARNING, JAPANESE TRANSLATIONS FSCM NO. SIZE DRAWING NO. 8E4630 REV B DO NOT SCALE DRAWING	
INTERPRET PER ANSI Y14.5 THIRD ANGLE PROJECTION		SHT 1 OF 2	

REVISION RECORD				
REV	ECO	DATE	DESCRIPTION	DRFT
--	----	----	SEE SHEET 1	

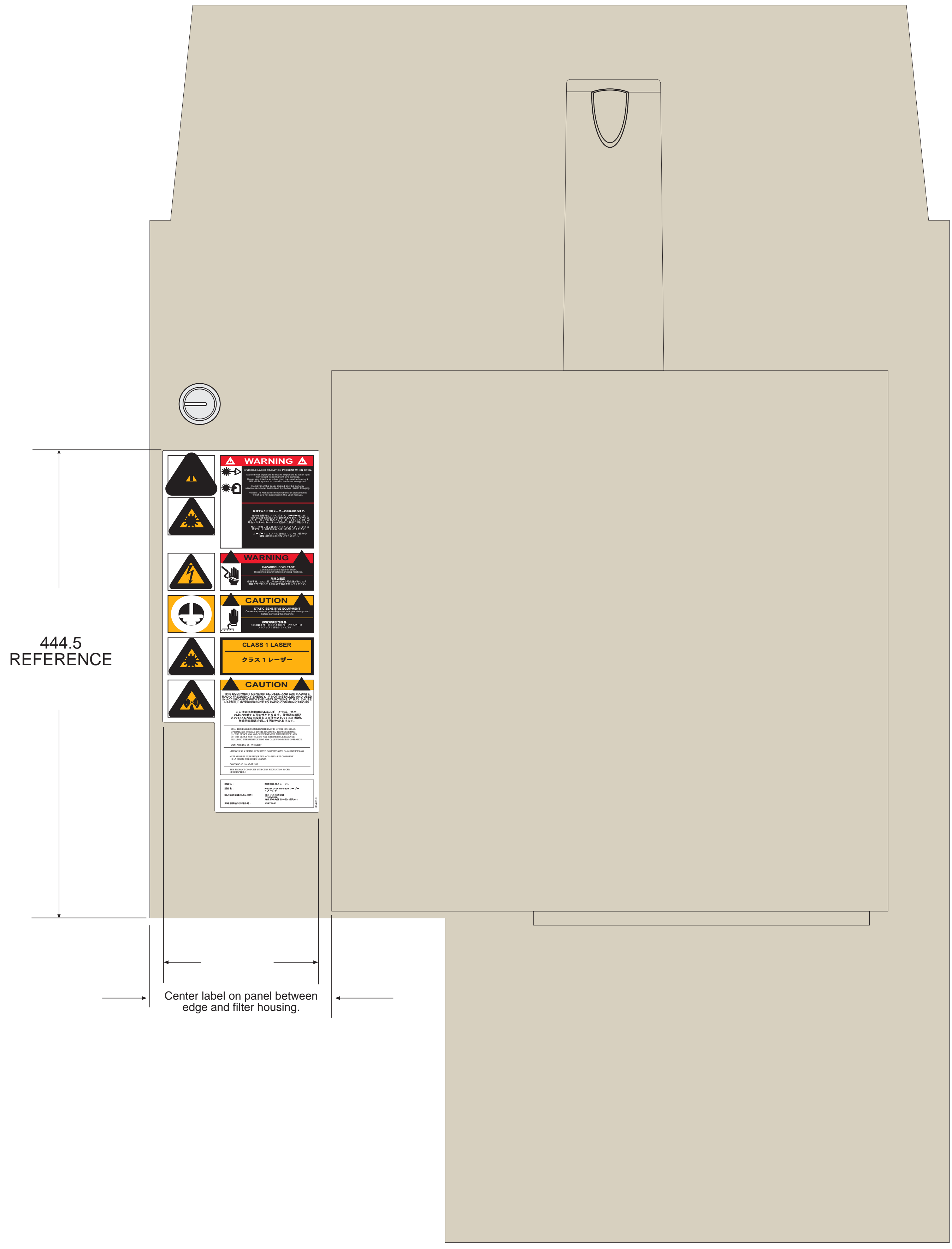

444.5
REFERENCE

Center label on panel between
edge and filter housing.

LABEL PLACEMENT ON HOST DEVICE PANEL

FSCM NO.	SIZE	DRAWING NO.	REV
	D	8E4630	B
DO NOT SCALE DRAWING			SHT 2 OF 2